

## Mówiący termometr cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI

### CECHY

1. Szybki i dokładny pomiar - zaledwie 60 sekund.
2. Elastyczna końcówka czyni pomiar wygodnym i bezpiecznym.
3. Przyjemny damski głos automatycznie odczytujący wynik pomiaru.
4. Przycisk umożliwiający głosowe odczytanie pomiaru w dowolnym momencie.
5. Dokładność, jak przy konwencjonalnym, rtęciowym termometrze.
6. Automatem wyłączenie po 3 minutach.
7. Zapamiętywanie wyniku ostatniego pomiaru.
8. Temperatura podawana w stopniach Celsjusza.
9. Wskaźnik niskiego poziomu baterii.

### MIERZENIE TEMPERATURY

1. Naciśnij przycisk **POWER**, aby włączyć termometr. Wyświetlacz pokazuje przez 3 sekundy wynik ostatniego pomiaru lub wyświetla literę „L”, jeżeli w pamięci nie jest przechowywany wcześniejszy wynik (naciśnij przycisk **TALK**, aby odsłuchać), a następnie termometr sygnalizuje gotowość do pracy mówiąc „gotowy”.
2. Umieść termometr pod językiem, pachą lub w odbycie, upewniając się, że termometr dobrze przylega w wybranym przez Ciebie miejscu pomiaru. Jest to istotne, aby uzyskać dokładny i wiarygodny wynik. Jeżeli podczas pomiaru wystąpiły błędy, na wyświetlaczu pojawi się napis "Err" oraz wypowiedziany zostanie komunikat „błąd”.
3. Po zakończeniu pomiaru, wynik jest odczytywany dwukrotnie. Aby ponownie odczytać wynik, naciśnij przycisk **TALK**.
4. Aby wyłączyć termometr, naciśnij przycisk **POWER**. Jeżeli tego nie zrobisz, termometr wyłączy się automatycznie po 3 minutach.

### TRZY METODY MIERZENIA TEMPERATURY

#### Metoda ustna: (przeciętna normalna temperatura - 37.0°C)

Umieść końcówkę termometru pod językiem. Sama końcówka powinna się znajdować tak głęboko, jak to możliwe. Przytrzymaj termometr w tym samym miejscu z zamkniętymi ustami. Staraj się trzymać termometr nieruchomo podczas pomiaru.


#### Metoda pod pachą: (przeciętna normalna temperatura - 36.7°C)

Jest to metoda alternatywna, stosowana w przypadku niemowlaków lub bardzo małych dzieci. Upewnij się, że skóra pod pachą jest sucha. Umieść termometr pod pachą, końcówką skierowaną do góry. Przyłóż rękę do boku tak, aby przytrzymać termometr w jednym miejscu.

#### Metoda odbytnicza: (przeciętna normalna temperatura - 37.6°C)

Nasmaruj końcówkę termometru środkiem nawilżającym na bazie wody, aby ułatwić umieszczenie termometru. Nie należy stosować wazeliny. Osoba, u której mierzona jest temperatura, powinna leżeć na boku, z lekko ugiętymi kolanami. Delikatnie umieść termometr w odbycie, nie głębiej niż 1 cm. Jeżeli napotkasz jakikolwiek opór, ZATRZYMAJ SIĘ.

### WSKAŹNIK SŁABEJ BATERII

Jeżeli napięcie baterii spadnie poniżej 2.4 V, na ekranie pojawi się symbol 

### CZYSZCZENIE TERMOMETRU

Termometr należy czyścić za pomocą wilgotnej szmatki nasączonej wodą lub alkoholem izopropylowym. Nie wolno zanurzać termometru w wodzie lub alkoholu.

### WYMIANA BATERII


Jeżeli dźwięk jest słaby, pojawiają się zakłócenia lub wyświetlacz jest niewyraźny,

oznacza to, że należy wymienić baterie. Aby to zrobić:

1. Za pomocą małego śrubokręta odkręć śrubkę na pokrywie baterii. Następnie zdejmij pokrywę.
2. Wymij stare baterie i zastąp je nowymi bateriami AG13 (1.5V, alkaliczne) zgodnie z polaryzacją zaznaczoną na dole otworu na baterie.
3. Nałóż pokrywę baterii i dokręć śrubę.

### SPECYFIKACJA

Zasilanie	AG13X2(1.5V Alkaliczne)
Zużycie prądu	Pomiar: 0.2mW Mówienie: 50 mW
Automatyczne wyłączenie	Po 3 minutach
Czujnik temperatury	Termistor
Najniższa wyświetlana wartość	0.1°C
Dokładność	±0.1°C
Zakres pomiaru	32.0°C do 43.0°C Poniżej 32.0°C wyświetla "L" Powyżej 43.0°C wyświetla "H"
Temperatura pracy:	16°C do 40°C
Wilgotność:	30% do 75%
Ciśnienie:	700 do 1060Pa
Temperatura przechowywania:	-20°C do 50°C
Wilgotność:	10% do 100%
Ciśnienie:	500 do 1060Pa
Żywotność	5 lat

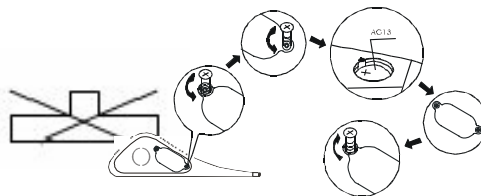

RYS 1: Schemat wymiany baterii dla HE-113

### OSTRZEŻENIE:

1. NIE STOSOWAĆ METODY USTNEJ U DZIECI.
2. NIE STOSOWAĆ TERMOMETRU DOUSTNIE PO JEGO UŻYCIU REKTALNYM.
3. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNIKIEM POMIARU NALEŻY PRZEPROWADZIĆ POMIAR PONOWNIE. JEŻELI PROBLEM NIE ZNIKA, NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.
4. OSOBA PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA MOŻE UŻYWAĆ TERMOMETRU TYLKO POD NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ.
5. TERMOMETR NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
6. PRZED UŻYCIEM, WYCZYŚĆ TERMOMETR MYDŁEM LUB 70% ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM.